

HISTOCORE WATER BATH M

HISTOCORE SLIDE DRYER

FACILITE LA FLOTTAISON DES COUPES ET LE SÉCHAGE DE VOS LAMES



HistoCore Water Bath M:

- Bac d'eau anodisé pour une plus grande durabilité et amovible pour un remplacement facile de l'eau.
- Le bac à eau de couleur noire et son rétroéclairage LED intégré offrent un excellent contraste et une visibilité optimale des rubans et de la qualité de coupe
- Le panneau tactile OLED offre une interface intuitive pour une utilisation facile du bain-marie et du séchoir de lames
- Chaque bain-marie peut alimenter jusqu'à 2 séchoirs de lames



HistoCore Slide Dryer en tant qu'accessoire*:

- Ensemble compact pour une économie d'espace sur la paillasse
- Peut contenir jusqu'à 30 lames à la fois pour une efficacité améliorée
- L'arrière-plan noir des supports de lames du séchoir permet une bonne visibilité des rubans
- Les supports chauffants inclinés à 45° permettent de positionner et de récupérer facilement les lames
- Séchage des lames de la température ambiante jusqu'à 75 °C
- Se connecte directement au HistoCore Water Bath M, éliminant le besoin d'une alimentation supplémentaire



*L'HistoCore Slide Dryer est un accessoire et ne peut être utilisé sans être connecté au bain-marie.

Réservé au diagnostic in vitro

Advancing Cancer Diagnostics
Improving Lives

Leica
BIO SYSTEMS




Copyright © 2023 Leica Biosystems, une division de Leica Microsystems Inc. Tous droits réservés. LEICA et le logo Leica sont des marques déposées de Leica Microsystems IR GmbH. HistoCore est une marque commerciale du groupe d'entreprises Leica Biosystems aux États-Unis et, en option, dans d'autres pays. Les autres logos, noms de produits et/ou noms de sociétés peuvent être des marques commerciales de leurs détenteurs respectifs.

230253 FR Rev C • 11/2023

HISTOCORE WATER BATH M

HISTOCORE SLIDE DRYER

DES OPTIONS D'AGENCEMENT FLEXIBLES QUI S'ADAPTENT À VOS BESOINS EN MATIÈRE DE FLUX DE TRAVAIL

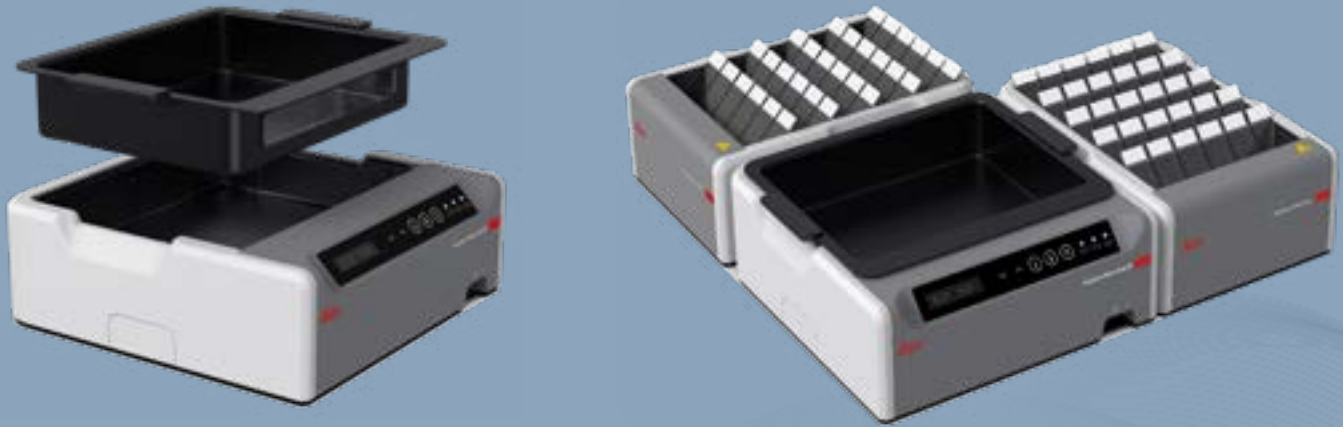

Caractéristiques Techniques

Nom du modèle	HistoCore Water Bath M	HistoCore Slide Dryer
Référence	140607020C1 Instrument principal	140607010C0 Accessoire optionnel
Température de chauffage	Jusqu'à 60 °C	Jusqu'à 75 °C
Dimensions (LxPxH)	280 x 280 x 105 mm 11.023 x 11.023 x 4.134 in	200 x 280 x 98 mm 7.874 x 11.024 x 3.858 in
Dimensions du bac à eau (LxPxH)	230 x 180 x 53 mm 9.055 x 7.087 x 2.087 in	
Poids à vide	3 kg (sans emballage)	3 kg (sans emballage)
Tension nominale	100-120 VAC ±10% 220-240 VAC ±10%	100-120 VAC ±10% 220-240 VAC ±10%
Éclairage LED interne	Oui	
Vitesse de chauffage	20 min +/- 10 %, avec un volume d'eau standard rempli, de 15 °C à 45 °C, à une température ambiante de 18 °C	

*L'HistoCore Slide Dryer est un accessoire et ne peut être utilisé sans être connecté au bain-marie.

Réservé au diagnostic in vitro

Advancing Cancer Diagnostics
Improving Lives

Leica
BIO SYSTEMS

